

INTRODUCCIÓN

Con el cepillo dental MX ONDA modelo **MX-HD2374** conseguirá una limpieza de los dientes más completa y en menor tiempo que con los cepillos de dientes convencionales.

Mediante el cabezal giratorio obtendrá una limpieza en profundidad de su dentadura además conseguirá un suave masaje en las encías, mejorando la circulación de la sangre. De esta manera, se eliminarán no sólo los restos de alimentos sino también la invisible placa bacteriana, previniendo de esta manera la formación del sarro, caries y la inflamación de las encías.

ANTES DE USAR EL CEPILLO DENTAL

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



- Este aparato no puede ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, **a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del aparato y sean supervisadas por un adulto o persona responsable.**
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- No introduzca el cuerpo principal del cepillo de dientes, en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie.
- Si el cepillo dental es utilizado por varias personas, por motivos de higiene se recomienda que cada persona utilice su propio cabezal.
- No emplee ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- Si no piensa utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco.
- No utilice un cabezal con las cerdas gastadas o dañadas.
- En caso de avería, anomalías o si el aparato se ha caído, no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Para la colocación y/o sustitución de las pilas siga los pasos descritos a continuación:

1. Extraiga la tapa del compartimento de las pilas tirando de la misma hacia el exterior.
2. Inserte 2 pilas (preferentemente alcalinas) de 1,5 V tipo LR06, AA, etc., respetando la polaridad + y - grabada en la tapa del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.


Nota: Las pilas contienen materiales contaminantes del medio ambiente, por eso una vez agotadas, NO las tire a la basura, deposítelas en el sitio adecuado para su posterior reciclado.

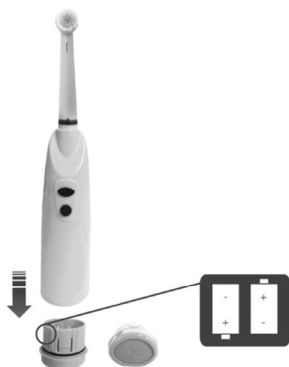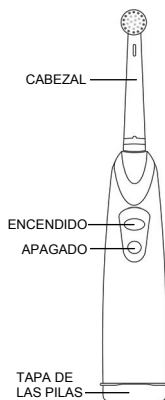

INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CABEZAL

Para extraer el cabezal gire este hacia la derecha 90 grados y tire del mismo hacia el exterior.

Para insertar el cabezal haga coincidir la marca de la anilla del cabezal con la guía situada en el cuerpo principal y gire suavemente el cabezal hacia la izquierda 90 grados, ver figura siguiente.

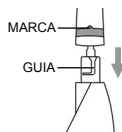

USO DEL CEPILLO DENTAL

Deposite la cantidad deseada de pasta dentífrica sobre las cerdas. Para iniciar la limpieza introduzca el cepillo en la boca de tal forma que las cerdas cubran los dientes delanteros y deslice el cepillo hacia delante y hacia atrás para que la pasta dentífrica penetre entre las cerdas, después pulse el botón de encendido y comience la limpieza desde los dientes hasta las muelas.

La limpieza se debe hacer despacio y con movimientos muy suaves, limpiando las tres caras de las piezas dentales, la línea de la encía y la zona interdental, por lo general solo son necesarios de 2 a 3 minutos para limpiar la dentadura y la lengua.

Finalizada la limpieza apague el cepillo antes de extraerlo de la boca, después de cada uso deberá eliminar los restos de pasta dentífrica de las cerdas, para ello sitúe la zona de las cerdas del cabezal bajo el grifo y con agua corriente elimine los restos, una vez limpias las cerdas sacuda el cepillo con el fin de eliminar el agua acumulada, para que estén secas antes de volver a utilizar el cepillo de dientes.

Nota: Para evitar salpicaduras de la pasta dentífrica, no encienda el cepillo hasta haberlo introducido en la boca y apáguelo antes de extraerlo de la misma.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar las cerdas sumérgalas en agua y pulse el botón de encendido, pasados unos segundos apague el cepillo y sacúdalo para eliminar el excedente de agua en las cerdas.
- Se recomienda sustituir el cabezal cada 3 ó 4 meses ya que las cerdas se debilitan, este tiempo varía en función del uso. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano para solicitar la pieza de repuesto.
- Limpie la superficie plástica de la carcasa con un paño húmedo y séquela con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	2 pilas* de 1,5 V tipo LR06, AA, etc.
Consumo	2 W
Velocidad y ángulo de giro	5000 rpm./ 60°
Autonomía	3 horas
Dimensiones y peso (sin pilas)	204 x 37 x 28,5 mm / 60 gr.

* Pilas no suministradas

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

Este producto cumple con la Directiva Europea 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética, modificada por la Directiva 93/68/CEE.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



MX ONDA, S.A.

Isla de Java, 37
28034 – MADRID

E-mail: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>